

Supports de tubes : **Aspiration gastrique*** **Endotrachéale*** **Alimentation***

Guide des spécifications


Taille	ETT	Gamme d'adaptation du diamètre extérieur de l'ETT	Dimensions des tubes d'alimentation et d'aspiration gastrique	
			A	C
0	2,5 mm*	3,3 – 3,7 mm	5 F	6 F**
1	3,0 mm	4,0 – 4,5 mm	6,5 F	8 F**
1x***	3,0 mm	4,0 – 4,5 mm	6,5 F	10 F
2	3,5 mm	4,5 – 5 mm	6,5 F	10 F
3	4,0 mm	5,0 – 5,5 mm	6,5 F	10 F

* Un cathéter d'aspiration à ligne 5 F est recommandé. ** Permet de sécuriser les cathéters EDI 6 F et 8 F. *** Arc de même dimension que la taille 2


La taille 1x d'ArcAngel peut contenir un ETT de 3,0 avec la même taille d'arc que la taille 2, pour s'adapter aux nourrissons plus grands qui ont besoin d'ETT plus petits.

Application de l'ArcAngel et des coussinets de joue


1. Sécuriser les voies respiratoires du nourrisson.
2. Utilisez le guide des caractéristiques techniques ci-dessus pour trouver la taille d'ArcAngel appropriée en fonction de la taille du tube et de la taille de l'arc correspondant.
3. Placez d'abord les coussinets de joue sur l'arc et positionnez-les directement devant les oreilles avec l'arc et le canon positionnés sur la lèvre supérieure (voir le schéma de droite). *Astuce : Tenez les coussinets de joue avec les deux mains et évasez-les légèrement lorsque vous les appliquez sur une peau propre/sèche.*
4. Ouvrez l'anneau de verrouillage rotatif jusqu'à l'ouverture de l'ETT et introduisez le tube dans la rainure à partir de la base (A). Introduisez progressivement le tube (B) jusqu'à ce qu'il soit bien fixé dans la rainure (C). Tournez l'anneau extérieur jusqu'à la position de butée de verrouillage pour fixer le tube en place.
5. Si une sonde d'alimentation ou d'aspiration gastrique est nécessaire, insérez la sonde dans le patient, tournez l'anneau de verrouillage extérieur jusqu'à l'ouverture appropriée, placez la sonde dans la rainure (comme à l'étape 4) et tournez l'anneau extérieur jusqu'à la position de butée de verrouillage pour fixer la sonde en place.

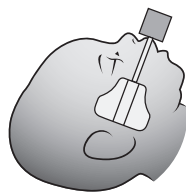

Alignement idéal


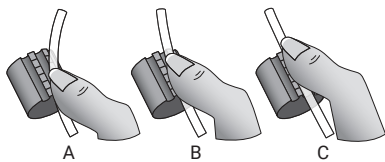


6. Pour ajuster un tube, ouvrez l'anneau de verrouillage extérieur jusqu'à l'ouverture souhaitée, avancez ou rabattez le tube **tout en le maintenant dans la rainure**, en utilisant les repères de 0,25 cm sur l'anneau comme guide, et verrouillez l'anneau extérieur.
7. En cas d'urgence ou pour une extubation d'essai, l'ArcAngel peut être retiré en maintenant les coussinets de joue en place, en tirant doucement l'ArcAngel hors des coussinets de joue, en laissant les coussinets et les tubes supplémentaires intacts. Le même ArcAngel peut être réinséré dans les coussinets de joue pour une utilisation continue si nécessaire.
8. **Pour retirer les coussinets de joue :** Essuyez généralement la surface externe de l'adhésif avec les lingettes Nurse Angele's Wipes ou le dissolvant d'adhésif de votre choix, en laissant le temps à l'adhésif de se saturer complètement. Ensuite, tirez doucement sur un coin de la compresse et essuyez continuellement l'interface peau/adhésif tout en retirant délicatement la compresse de la joue.
9. Remplacez les coussinets de joue s'ils se décollent. **Remarque : Les deux tailles de coussinets de joue sont compatibles avec toutes les tailles d'ArcAngel.**
10. **Pour remplacer les coussinets de joue :** 1 personne tient l'ETT, retire l'arc des deux coussinets de joue, remplace les deux coussinets sur la housse, puis réinsère l'arc dans les nouveaux coussinets de joue.

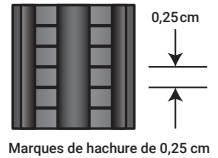


Astuces d'utilisation

- La personne qui place l'ArcAngel doit se trouver à la tête du lit.
- En cas d'œdème du visage, ArcAngel peut être ajusté davantage vers le haut et vers l'extérieur des pommettes pour s'adapter à l'enflure. Chaque point de repère sur les bras de l'ArcAngel mesure 0,25 cm. Si un ajustement du bras est nécessaire, avancer d'abord l'ETT (sonde endotrachéale), ajuster ensuite l'arc pour l'adapter au visage, puis révérifier la position de l'ETT.
- Insertion correcte d'ArcAngel dans les coussinets de joue
 - Assurez-vous que les bras de l'ArcAngel restent en place en insérant complètement dans le canal du coussinet de la joue. L'extrémité barbelée garantit que les bras restent dans le canal. Voir le schéma à droite.
- Pour s'adapter à la variabilité du diamètre extérieur de l'ETT, des bandes adhésives sont fournies pour assurer une fixation sûre à l'intérieur de l'ArcAngel.

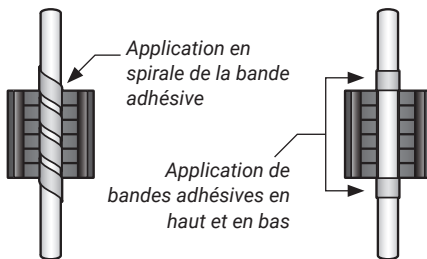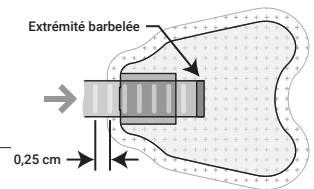

L'ajout de bandes adhésives permet d'augmenter la force de traction jusqu'à 70 %.

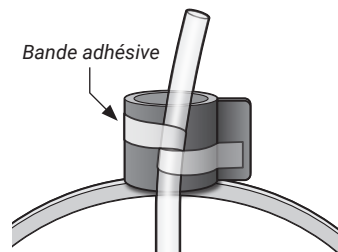

Utiliser la bande adhésive pour coller les tubes de taille différente sur le côté de l'anneau extérieur.

L'ARCANGEL ET LES COUSSINETS POUR LES JOUES SONT DESTINÉS À UN SEUL PATIENT

Fabricant : WarriorNP
2211 South Telegraph Rd
Suite #7230, Bloomfield Hills, MI 48302,

USA UKRP: AF Pharma Service UK Ltd
Suite 140 Temple Chambers, 3-7,
Temple Avenue,
London, EC4Y ODA, England, UK



EUAR: AF Pharma Service Europe SL
Muntaner 281, 08021, Barcelona,
Espagne